

**Fargematching
har nå
blitt enklere**

3M™ Filtek™ Easy Match Universal kompositt

- ▶ Intuitivt fargevalg
- ▶ Naturlig adaptiv opasitet
- ▶ Reduserer din lagerbeholdning



3M™ Filtek™ Easy Match Universal kompositt

Bright. Natural. Warm.

Kun 3 farger gir en ypperlig match til stort sett alle pasienters smil.

Dette kan du forvente:

- ▶ En enklere arbeidsprosedyre til restaureringer med en enkel farge
- ▶ Resultater med naturlig utseende
- ▶ Et effektivt system basert på klinisk dokumentert nanoteknologi
- ▶ Raskt og intuitivt fargevalg til både anteriore og posteriore restaureringer

Opplev fargematch på en enkel måte. Enkelt. Intuitivt.

- ☒ Kun 3 farger: Bright, Natural, Warm
- ☒ Ingen komplisert fargeskala
- ☒ Ingen "blocker" er nødvendig

Enkelhet uten kompromisser.

Filtek Easy Match Universal kompositt gir en ypperlig fargematching. Den tilpasser seg de omgivende tennene og gir et naturlig smil.



"Filtek Easy Match er en enkel løsning for vanlige restaureringer. Effektiviser lagerbeholdningen, og lag restaureringer som går i ett med de andre tennene!"

– Dr. Thomas Giacobbi
Chandler, Arizona, USA


Det er intuitivt og enkelt å velge en farge:

Chroma – eller fargeintensitet – er kun én av de komponentene som gir en fantastisk fargematching. Selv en kompositt med “riktig farge” kan skille seg ut fra de omkringliggende tennene hvis dens **value** (hvor relativt lys/mørk den er) eller **opasitet** ikke heller er en god match.


Sammen dekker de 3 fargene i 3M™ Filtek™ Easy Match Universal kompositt de klassiske VITA-farger – ingen “blocker” er nødvendig.

“3M™ Filtek™ Easy Match er en game-changer for tannleger som meg, som streber etter det ypperste, men er avhengige av enkelhet. Dens bemerkelsesverdige evnen til å blende til tannens farge forenkler fargevalget og sikrer presise resultater med minimal innsats. Håndteringen er nem og ubesværet, noe som gjør påføringen til en lek. Med denne kompositten har det aldri vært enklere å oppnå en feilfri finish og et naturlig smil. Det er ikke bare et produkt, det er en uunnværlig alliert for enhver tannlege som ønsker enkelhet, effektivitet og estetisk foretreffelighet.”


– Dr. Jordi Manauta
Italy

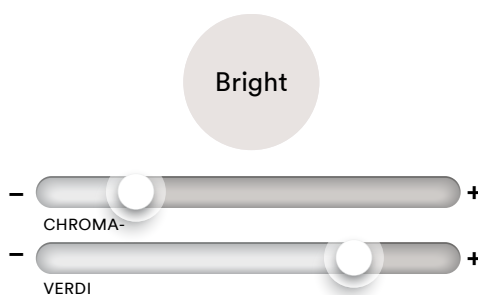

Bright: lav chroma, høy value

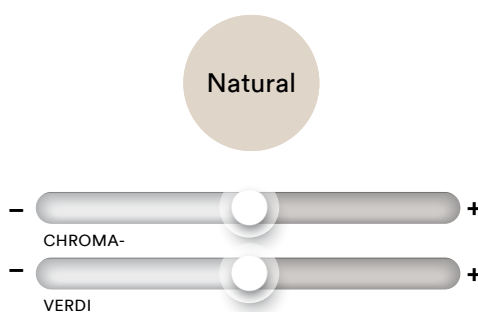


Natural: medium chroma og value

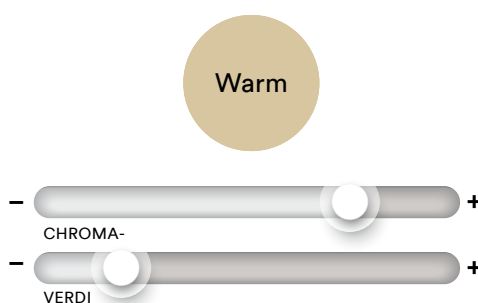

Warm: høy chroma, lav value

Egenskaper du kommer til å elske

- ▶ Ypperlig fargematching for de fleste anteriore og posteriore restaureringer
- ▶ Raskt, enkelt og intuitivt valg av farge uten at det går ut over opasiteten
- ▶ Forenklet “single-shade” restaureringer, uten behov for blokkering
- ▶ En mindre lagerbeholdning bidrar til mindre kast av materialer som sjelden brukes
- ▶ Fast konsistens
- ▶ Egnet for komposittoppvarming, som senker ekstruderingskraften¹ uten å endre de fysiske egenskapene²

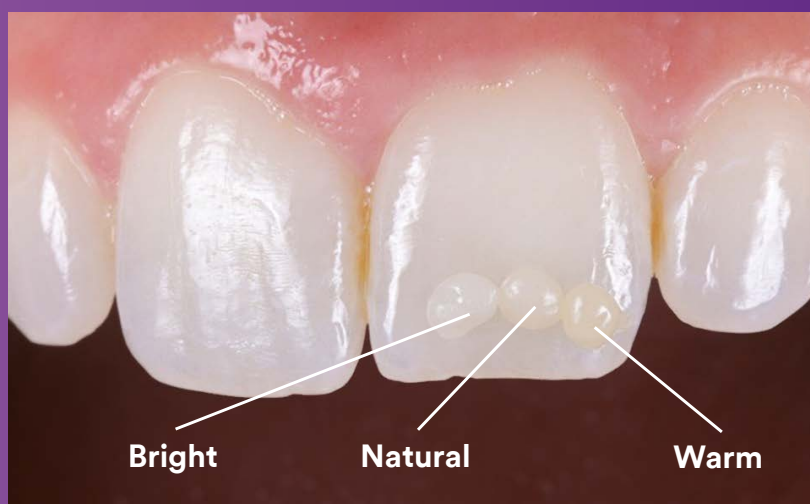

1. Interne 3M-data


2. Ved oppvarming i henhold til bruksanvisningen (kapsler: opptil 70 °C i opptil 1 time)

Hvordan fungerer det?

Med naturlig tilpasset opasitet.

3M™ Filtek™ Easy Match Universal kompositt trenger ikke en “blocker” for å maskere mørket fra munnhulen i anteriore restaureringer. Den naturlig adaptive opasiteten sørger for emaljelignende translucens i tykkelser på 0,5 til 1 mm – akkurat der du trenger den - til bevel og insisalt. Tykkelsene ≥ 2 mm gir en dentinlignende opasitet.

Alle kompositter blir mer translucente når de påføres i tynnere lag. Men den naturlig adaptive opasiteten til Filtek Easy Match Universal kompositt er optimalt tilpasset både dentin og emalje, så den kan matche de omkringliggende tennene og gi et naturlig utseende.

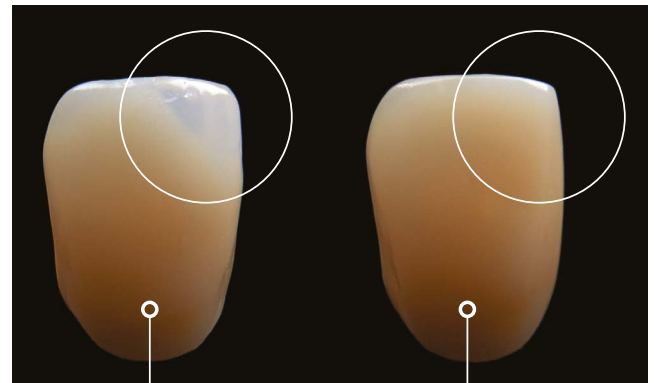


Konkurrerende kompositt med en enkel farge.

Ingen “blocker” brukt

3M™ Filtek™ Easy Match Universal kompositt, “Natural” farge.

Ingen “blocker” er nødvendig

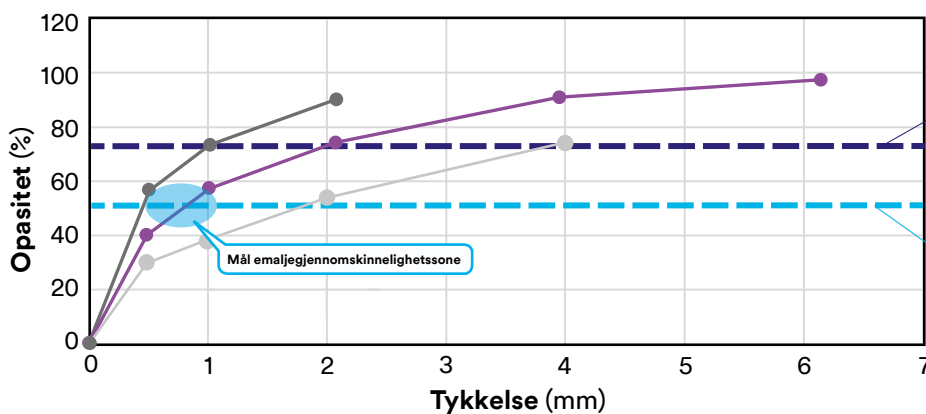

Dentin -

3M™ Filtek™ Easy Match viser dentinlignende opasitet ved tykkelser på ≥ 2 mm

Emalje -

3M™ Filtek™ Easy Match viser emaljelignende gjennomsiktighet med tykkelser på 0,5 til 1 mm

Kilde: 3M-internt*


— 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative A2-D

— 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative


— Konkurrerende kompositt med en enkel farge (ingen “blocker” brukt)

Vi ser nærmere på TRUE-nanoteknologi

Filtek Easy Match Universal kompositt har samme TRUE-nanofillerteknologi som brukes i våre ledende Filtek kompositter. De unike nanoklusterne gir enestående slitestyrke og bidrar til at kompositten beholder en jevn glans.

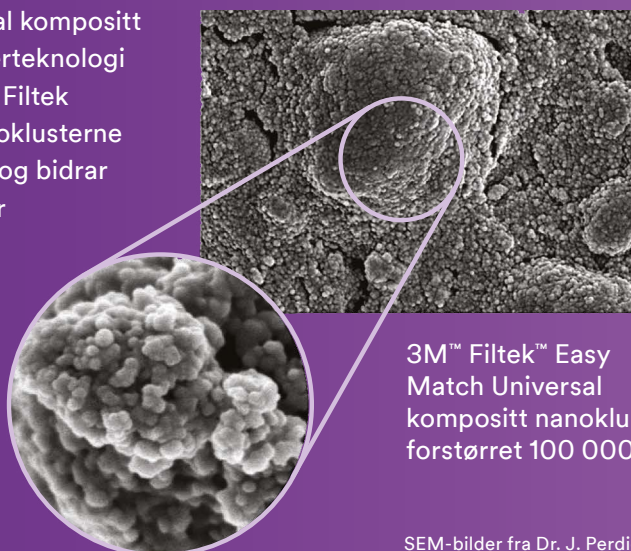

3M™ Filtek™ Easy Match Universal kompositt nanokluster forstørret 100 000 ganger

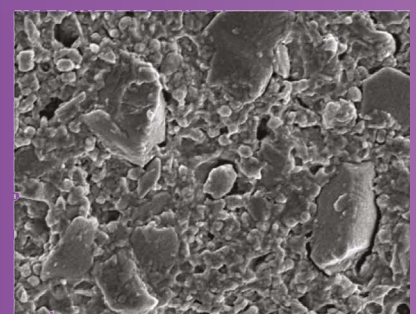

Ledende konkurrerende kompositt

SEM-bilder fra Dr. J. Perdigao, University of Minnesota.



Inngår i serien med 3M™ Filtek™ kompositt- produkter

Anerkjent i over 50 år.
2 milliarder restaureringer
til nå.

Ved hjelp av vår **TRUE**-nanoteknologi har 3M™ Filtek™ Dental kompositter hjulpet tannleger over hele verden med å lage over 2 milliarder restaureringer. Filtek-serien gir deg de mulighetene du trenger i stort sett alle kliniske situasjoner: fra anteriort til posteriort, estetikk av høy kvalitet til svært effektive prosedyrer og alt i mellom. Uansett om du trenger et universelt, flytende eller bulkfill komposittmateriale, anteriort eller posteriort, gir Filtek-serien deg estetiske og effektive løsninger.

“Jeg setter virkelig stor pris på Filtek Easy Match Universal kompositt. Komposittmaterialet er veldig godt å arbeide med og gir svært pene poleringer. Det forenklede fargesystemet gir virkelig flotte resultater.”

– Dr. Nick Marongiu
La Jolla, California, USA



Utmerket
bevaring av
overflateglatthet



Suveren slitestyrke



Fast konsistens



Sikker for
komposittoppvarming
og injection moulding.¹

1. Varm kapsler opptil 70 °C i opptil 1 time.



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Bright

Artikkelnr. Produktinformasjon

6210B	(20) kapsler, 0,2 g/hver
6220B	(1) sprøyte, 4 g/hver



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Natural

Artikkelnr. Produktinformasjon

6210N	(20) kapsler, 0,2 g/hver
6220N	(1) sprøyte, 4 g/hver



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Warm

Artikkelnr. Produktinformasjon

6210W	(20) kapsler, 0,2 g/hver
6220W	(1) sprøyte, 4 g/hver

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Introduksjonssett

Artikkelnr. Produktinformasjon

6210K	(60) kapsler, 0,2 g/hver: 20 stk. av hver av fargene Bright, Natural og Warm
6220K	(3) sprøyter, 4 g/hver: 1 stk. av hver av fargene Bright, Natural og Warm

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Volumpakker

Artikkelnr. Produktinformasjon

6210	(100) kapsler, 0,2 g/hver: Kun Natural-fargen
6220	(5) sprøyter, 4 g/hver: Kun Natural-fargen



3Mnorge.no/FiltekEasyMatch



Solventum Dental Solutions
Karvesvingen 5, 0576 Oslo, Norge

* Kilde: Interne 3M-data.

@ Solventum 2024. Solventum, S-logoen og Filtek er varemerker som tilhører Solventum eller dets tilknyttede selskaper. 3M og 3M-logoen er varemerker som tilhører 3M. Andre varemerker tilhører sine respektive eiere.